



GC GRADIA DIRECT F10

Światłoutwardzalny, płynny kompozyt hybrydowy

Łatwa w użyciu, płynna żywica
do podścielania bezpośrednich
wypełnień kompozytowych



GC
FIRST IS QUALITY

GC GRADIA DIRECT Flo

Światłoutwardzalny, płynny kompozyt hybrydowy

Kompozyt podścielający pierwszego wyboru pod wypełnienia GC GRADIA DIRECT i nie tylko...



GC GRADIA DIRECT Flo - płynny, mikrohybrydowy kompozyt jest częścią nowej rodziny produktów GC utworzonej przez system łączący GC UniFil Bond i materiały do wypełnień GC GRADIA DIRECT.

Wiele płynnych kompozytów dostępnych na rynku polecanych jest jako materiały uniwersalne. Jednak podczas stosowania tych produktów w praktyce klinicznej pojawiają się problemy albo z niewystarczającą konsystencją albo nieodpowiednimi do danych wskaźników parametrami technicznymi.



GC GRADIA DIRECT Flo ze względu na specjalnie dostosowane właściwości fizyczne i konsystencję polecana jest

jako podścielenie pod wypełnienia kompozytowe takie jak np. GC GRADIA DIRECT. Ponadto nadaje się idealnie do wypełnień bardzo małych ubytków oraz do korekty bardzo małych nieregularności w kształcie zęba.

Formuła GC GRADIA DIRECT Flo umożliwia łatwy sposób użycia, a strzykawka zapewnia bardzo precyzyjne podawanie materiału.


Wskazania

Płynna, nieklejąca się i doskonale dopasowująca się do ścian ubytku konsystencja sprawia, że GC GRADIA DIRECT Flo jest szczególnie przystosowana do:

- wyścielenia wnętrza ubytku pod bezpośrednie wypełnienia kompozytowe takie jak np. z GC GRADIA DIRECT
- wypełnienia tunelowego
- wypełnienia bardzo małych ubytków
- korekty małych nieregularności kształtu zęba
- naprawy uszkodzonych wypełnień kompozytowych

Łatwy w użyciu

Niektóre płynne kompozyty są zbyt lejące albo zbyt lepkie. Konsystencja GC GRADIA DIRECT Flo powoduje, że materiał jest optymalnie płynny i jednocześnie nie klei się. Nałożony, szybko wypełnia wnętrze ubytku, lecz nie ścieka.

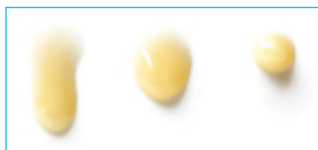

Żywica zbyt płynna GC GRADIA DIRECT Flo właściwa konsystencja Żywica zbyt gęsta

Łatwy w aplikacji

Strzykawki używane do GC GRADIA DIRECT Flo posiadają okrągły uchwyt umożliwiający manipulację we wszystkich kierunkach. Ponadto dostępne są dwa rodzaje zakrzywionych końcówek: giętkie końcówki metalowe w kształcie igły i plastikowe dla dzieci lub pacjentów obawiających się igieł.

Utwardzany światłem i widoczny na zdjęciach Rtg

Element pełnego systemu kompozytowego do wypełnień
GC GRADIA DIRECT Flo jest integralną częścią naszego nowego systemu do bezpośrednich wypełnień, wspólnie z kompozytem GC GRADIA DIRECT i systemem łączącym GC UniFil Bond.

Opakowania

Odcień: A3

Uzupełnienie:

2 x 1.5 g / 0.80 ml w strzykawkach, 4 metalowe końcówki i 2 osłony do ochrony przed światłem

Aksesoria:

GRADIA DIRECT Flo:
kończówki metalowe, 20 szt.
kończówki plastikowe, 20 szt.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
3001 Leuven - Belgium
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
E-mail: info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
Ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
E-mail: poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC
FIRST IS QUALITY