


Wiosna 2011

DAC UNIVERSAL
AUTOKLAW DO KOŃCÓWEK



sirona.
The Dental Company

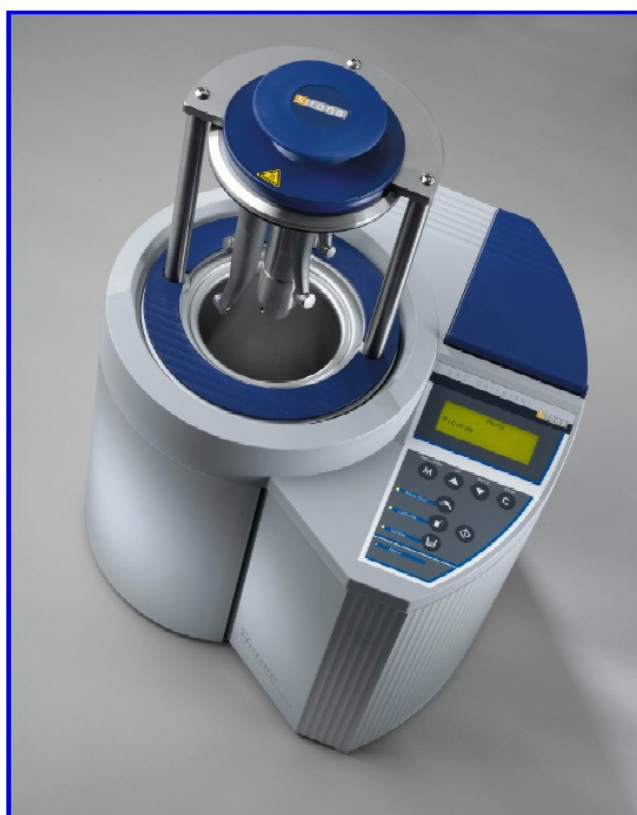

Autoklaw automatycznie myje, smaruje i sterylizuje końcówki w czasie około 12 minut.

MYCIE KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH

Podstawą skutecznej sterylizacji jest mycie instrumentów przed procesem sterylizacji. DAC UNIVERSAL czyści wewnętrzne kanały końcówek stomatologicznych (m.in. kątnic, prostnic, turbin). W czasie mycia zewnętrzne instrumenty są myte dwukrotnie zimną wodą (mycie pulsacyjne) i raz gorącą wodą. Proces ten usuwa biofilm i brud bardziej efektywnie.

Manualne wyczyszczenie kanałów jest bardzo trudne. Dzięki DAC UNIVERSAL możliwe jest dokładne wyczyszczenie instrumentów zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, przez co są one optymalnie przygotowane do sterylizacji.

SMAROWANIE KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH

Suche kanały są smarowane odpowiednią ilością oleju. Olej jest wprowadzany w takiej samej ilości do każdego instrumentu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU W KLINICE

Używając DAC UNIVERSAL redukujemy czas potrzebny do mycia i smarowania końcówek stomatologicznych w sposób manualny.

STERYLIZACJA

DAC UNIVERSAL posiada trzy cykle sterylizacyjne:

- 134 °C, sterylizacja 3 minuty
- 134 °C, sterylizacja 18 minut
- 121 °C, sterylizacja 15 minut

DANE TECHNICZNE:

- Sterylizacja wsadów typu A i B
- Pojemność komory: 2 litry
- Zbiornik wody zużytej: 2 litry
- Zbiornik oleju: 0,2 litra
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Wbudowany czujnik przewodnictwa wody mierzy jakość wody, zapewniając długą żywotność maszyny
- Moc: 1100 W
- Jakość wody: demineralizowana lub destylowana woda $<3\mu\text{S}$
- Sprężone powietrze pod ciśnieniem: 2,5 – 2,8 Bar
- Odprowadzanie zużytej wody, pary i oleju
- Wysokość przy zamkniętej pokrywie: 35 cm
- Wysokość przy otwartej pokrywie: 60 cm
- Szerokość: 36 cm
- Głębokość: 37 cm

Cena brutto z 6 adapterami: 18.600 zł.



Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Ceny zawierają koszty dostawy i standardowego montażu autoklawu. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Cennik nr 03/2011 obowiązuje do dnia 30.06.2011. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.